


SOLUTIONS ÉVOLUTIVES **PANTHER**®

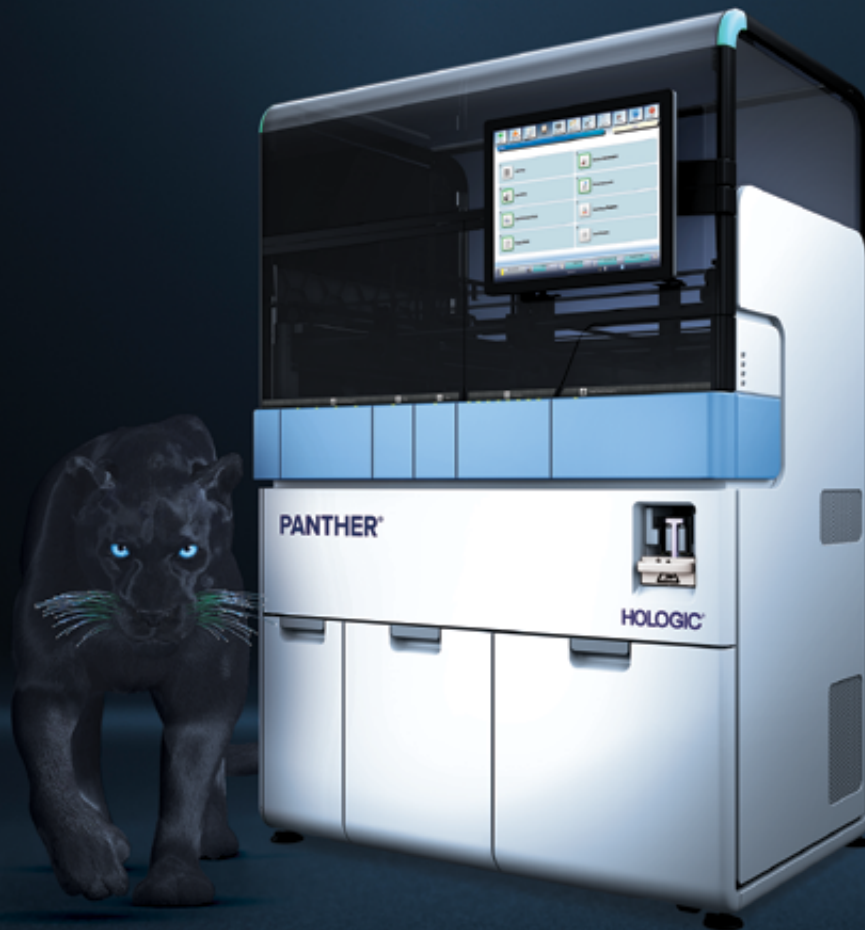

Consolidez vos tests moléculaires dès aujourd'hui sur une plateforme
qui offre une **évolutivité** et une **croissance** dans l'avenir.

Le pouvoir de **choisir**. Le potentiel de **croître**.

Tout commence avec le système Panther®, la base des solutions évolutives Panther®. Une fois cette base en place, vous pourrez personnaliser vos tests de diagnostic moléculaire en choisissant parmi un large menu de tests et de composants supplémentaires qui offriront à votre laboratoire une voie économique et évolutive vers la croissance.



PANTHER®

La base de la consolidation des tests, de l'évolutivité et de la croissance futures.¹

- ▶ Accès aléatoire et continu.
- ▶ Vaste menu rassemblant les tests d'IST, la santé des femmes, respiratoires et les tests de charge virale.
- ▶ Faible encombrement permettant d'économiser de l'espace et une redondance.



RAJOUTER **PANTHER FUSION®**

Ajoute de la flexibilité, plus de possibilités et un menu diversifié de tests, ainsi que la possibilité de réaliser des tests développés en laboratoire.¹

- ▶ Extraction totale des acides nucléiques et PCR.
- ▶ Réactifs prêts à l'emploi avec une stabilité de 60 jours.
- ▶ Jusqu'à 32 tests réalisés simultanément, et jusqu'à 500 tests traités en 8 heures (selon le type de tests).



RAJOUTER **PANTHER® PLUS**

Ajoute d'autres possibilités, plus de temps de fonctionnement et plus de débit en 24 heures.¹

- ▶ Module d'expansion de l'UTM augmentant sa capacité d'utilisation à 600 tests, permettant jusqu'à 13,5 heures de fonctionnement.
- ▶ Changement des fluides universels et élimination des déchets pendant le traitement du test.
- ▶ Possibilité de jeter les déchets liquides directement dans le drain du laboratoire prévu à cet effet.
- ▶ Jusqu'à 210 tests supplémentaires réalisés en 24 heures.

La consolidation des tests moléculaires sur une plateforme évolutive résout les défis posés aux laboratoires

Réduit les besoins en formation et en compétences techniques.

Rationalise et réduit le nombre de PON.

Les solutions évolutives Panther sont là pour répondre à vos besoins, qu'il s'agisse de traiter un petit, moyen ou grand volume de tests. Grâce à leur faible encombrement et à leur technologie éprouvée, nos appareils apportent des solutions innovantes et flexibles à votre laboratoire, aujourd'hui et dans l'avenir.¹



RAJOUTER PANTHER® LINK

Connecte virtuellement plusieurs systèmes Panther pour partager des informations et surveiller les tests à partir d'un tableau de bord centralisé.²

- ▶ Permet le partage des trousse de réactifs, les requêtes de tests prescrits par réflexe, la gestion des lots et des comptes d'utilisateurs d'utilisateurs.
- ▶ Un tableau de bord centralisé, disponible sur ordinateur, tablette et moniteur TV permet de superviser l'inventaire, l'état de l'appareil, les activités d'entretien et les résultats d'analyses.
- ▶ Les fonctionnalités de diagnostic à distance garantissent un service plus rapide et améliorent les capacités de dépannage.

Libère de l'espace grâce au faible encombrement.

Réduit vos coûts de connexion LIS.



RAJOUTER PANTHER® TRAX

Connecte physiquement les systèmes Panther pour augmenter les volumes de tests sans conséquence sur le personnel.³

- ▶ Un emplacement centralisé pour le chargement et le tri des échantillons, ainsi qu'un stockage intégré pour l'archivage des échantillons après leur traitement.
- ▶ Le système de suivi envoie automatiquement des tubes d'échantillonnage fermés vers les appareils pour réaliser les analyses.
- ▶ Capsuleuse-décapsuleuse en option pour les tubes de plasma/sérum.
- ▶ Formes et tailles modulables à l'espace disponible en laboratoire.

Augmente le volume de tests sans augmenter le personnel.

Réduit les coûts de main-d'œuvre et de fonctionnement.

CHOISIR

22

tests disponibles

PLUS

8

autres en développement

SUR

1

plateforme évolutive

SANTÉ DES FEMMES

- CT/NG
- Chlamydia trachomatis*
- Neisseria gonorrhoeae*
- Mycoplasma genitalium*
- Trichomonas vaginalis*
- Vaginose bactérienne
- Candidose vaginale/*Trichomonas vaginalis*
- VHS 1 et 2
- VPH
- VPH 16-18/45
- GBS
- M. gen Macrolide Resistance[†]
- NG Resistance[†]

MALADIE INFECTIEUSE

- VIH-1 Quant Dx
- VHC Quant Dx
- VHB Quant
- Grippe A/B/VRS
- Parafllu
- AdV/hMPV/RV
- SARM
- CMV
- SRAS-CoV-2*
- SRAS-CoV-2/grippe A/B*
- SRAS-CoV-2/grippe A/B/RSV*
- Bactérie GI[†]
- Bactérie GI expansée[†]
- Virus GI[†]
- Parasite GI[†]
- EBV[†]
- C. difficile[†]

BÂTIR



CROÎTRE



Productivité



Efficacité



Tests par FTE

*Ces tests ont été autorisés par Santé Canada en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (AUI) pour des laboratoires autorisés; les tests SARS-CoV-2 Aptima et Panther Fusion ont été autorisés uniquement pour la détection de l'acide nucléique du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes; le test SARS-CoV-2/Flu Aptima a été autorisé uniquement pour la détection qualitative simultanée et la différenciation de l'acide nucléique du SARS-CoV-2, de la grippe A et de la grippe B, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes.

[†] En développement et non offert à la vente.

Référence : 1. Panther / Panther Fusion Operators Manual AW-30520-001 Rev.001, San Diego, CA; Hologic, Inc., 2024. 2. Panther Link - Dashboard Command and Data Sharing Application Sheet AW-31210-001 Rev.001, San Diego, CA; Hologic, Inc., 2024. 3. Panther Trax System Operator's Manual AW-26060-001 Rev.002 San Diego, CA; Hologic, Inc., 2024.

PB-00746-CAN-2201 Rév. 002 © 2025 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Panther, Panther Fusion, Aptima et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques, marques déposées et noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces informations sont destinées aux professionnels de la santé et ne constituent pas une promotion ou une sollicitation d'achat des produits dans les pays où ces activités sont interdites. La documentation Hologic est distribuée par l'intermédiaire de sites Web, de systèmes de diffusion électronique et de salons commerciaux; aussi, il n'est pas toujours possible de contrôler la source d'apparition. Pour en savoir plus sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez communiquer avec votre représentant local Hologic.